



## V.A.C. VeraFlo™ Therapy

V.A.C. VERAFLO™ THERAPY  
GARANTISCE MAGGIORI VANTAGGI  
TERAPEUTICI.

### Risultati degli studi clinici

- Riduzione dei giorni di ospedalizzazione, chiusura rapida e guarigione dell'infezione.<sup>4</sup>

### Risultati degli studi pre-clinici e di laboratorio

- In uno studio condotto sui suini con instillazione di soluzione fisiologica, l'uso di V.A.C. VeraFlo™ Therapy ha favorito notevolmente il riempimento della lesione rispetto alla sola terapia a pressione negativa.<sup>5,6</sup>

- L'uso di V.A.C. VeraFlo™ Therapy con soluzioni appropriate può controllare i batteri che formano la biopellicola.<sup>6</sup>

Per un elenco delle soluzioni per il trattamento topico delle ferite compatibili con V.A.C. VeraFlo™ Therapy, contattare il rappresentante KCI di zona.



Per ulteriori informazioni sul sistema terapeutico V.A.C.Ulta™ o per una dimostrazione del prodotto, contattare il rappresentante KCI di zona o visitare il sito web [www.vaculta.com](http://www.vaculta.com).

INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE DEL SISTEMA V.A.C.ULTA™*	
Codice	Descrizione
ULTDEV01	Unità terapeutica V.A.C.ULTA™
ULTVFL05SM	Medicazione V.A.C. VeraFlo™, piccola, confezione da 5
ULTVFL05MD	Medicazione V.A.C. VeraFlo™, media, confezione da 5
ULTVCL05MD	Medicazione V.A.C. VeraFlo Cleanse™, media, confezione da 5
ULTLNK0500	Cassetta V.A.C. VeraLink™, confezione da 5
ULTDUO0500	Set di tubi V.A.C. VeraT.R.A.C. Duo™, confezione da 5

\*Il sistema V.A.C.Ulta™ è compatibile con tutti i contenitori InfoV.A.C.®. Quando si utilizza il sistema V.A.C.Ulta™ esclusivamente con V.A.C.® Therapy, usare le medicazioni V.A.C.® con tecnologia SensaT.R.A.C.™.


#### Bibliografia

1. Vuerstaek JD, Vainas T, et al. State-of-the-art treatment of chronic leg ulcers: A randomized controlled trial comparing vacuum-assisted closure (V.A.C.) with modern wound dressings. *J Vasc Surg*. 2006;44(5):1029-37; discussione 1038. Epub 2006 Sept 26. RCT n=60. 2. Schwien T, Gilbert J, Lang C. Pressure ulcer prevalence and the role of negative pressure wound therapy in home health quality outcomes. *OWM*. 2005;51(9):47-60. Studio retrospettivo n=2348. 3. Page JC, Newswander B, Schwenke DC, et al. Retrospective analysis of negative pressure wound therapy in open foot wounds with significant soft tissue defects. *Adv Skin Wound Care*. 2004;17(7):354-364. Studio retrospettivo n=47. 4. Gabriel A, Shores J, Heinrich C, et al. Negative pressure wound therapy with instillation: a pilot study describing a new method for treating infected wounds. *Int Wound J*. 2008;5:339-413. A prospective study of hospitalized patients with a variety of complex, open, infected wounds were treated with V.A.C. Instill® Therapy and Silver Nitrate (n=15) and Moist Wound Therapy (n=15). 5. Leung BK, LaBarbera LA, Carroll CA, et al. The effects of normal saline instillation in conjunction with negative pressure wound therapy on wound healing in a porcine model. *Wounds*. 2010;22(7):179-187. 6. Dati KCI in archivio

**NOTA: i prodotti e le terapie KCI sono dotati di indicazioni, avvertenze, controindicazioni, precauzioni e informazioni sulla sicurezza. Prima dell'applicazione, consultare un medico e le istruzioni per l'uso del prodotto.**


©2011 KCI Licensing, Inc. Tutti i diritti riservati. I blocchi MEGA BLOKS vengono utilizzati con l'autorizzazione di MEGA Brands Inc. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di KCI Licensing, Inc., delle sue consociate e/o di suoi licenziatari. DSL N. 10-0731.EMEA (05/2011)

<b>ITALIA</b> KCI Medical Srl Via Meucci, 1 20090 Assago (Milano) Italia 24h Customer Service Tel. +39 02 45 7174 222 Tel. +39 02 45 7174 1 Fax +39 02 45 7174 210 <a href="http://www.kci-medical.it">www.kci-medical.it</a>	<b>Schweiz</b> KCI Medical GmbH Ifangstrasse 91 CH-8453 Rümlang-Zürich 24h Hotline +41 0848848900 Fax +41 0848 848 901 Centralino +41 43 455 3000 Fax +41 43 455 3020 <a href="http://www.kci-medical.com">www.kci-medical.com</a>	<b>INTERNATIONAL HEAD OFFICE</b> KCI Europe Holding B.V. Parktoeren 6th Floor Van Heuven Goedhartlaan 11 PO Box 129 1180 AC Amstelveen The Netherlands Tel +31 (0) 20 426 0000 Fax +31 (0) 20 426 0099 <a href="http://www.kci-medical.com">www.kci-medical.com</a>	<b>GLOBAL HEAD OFFICE</b> KCI USA Inc. 8023 Vantage Drive San Antonio TX 78230 U.S.A. Numero verde 1 800 275 4524 Fax +1 210 255 6991 <a href="http://www.kci.com">www.kci.com</a>
--	--	---	---

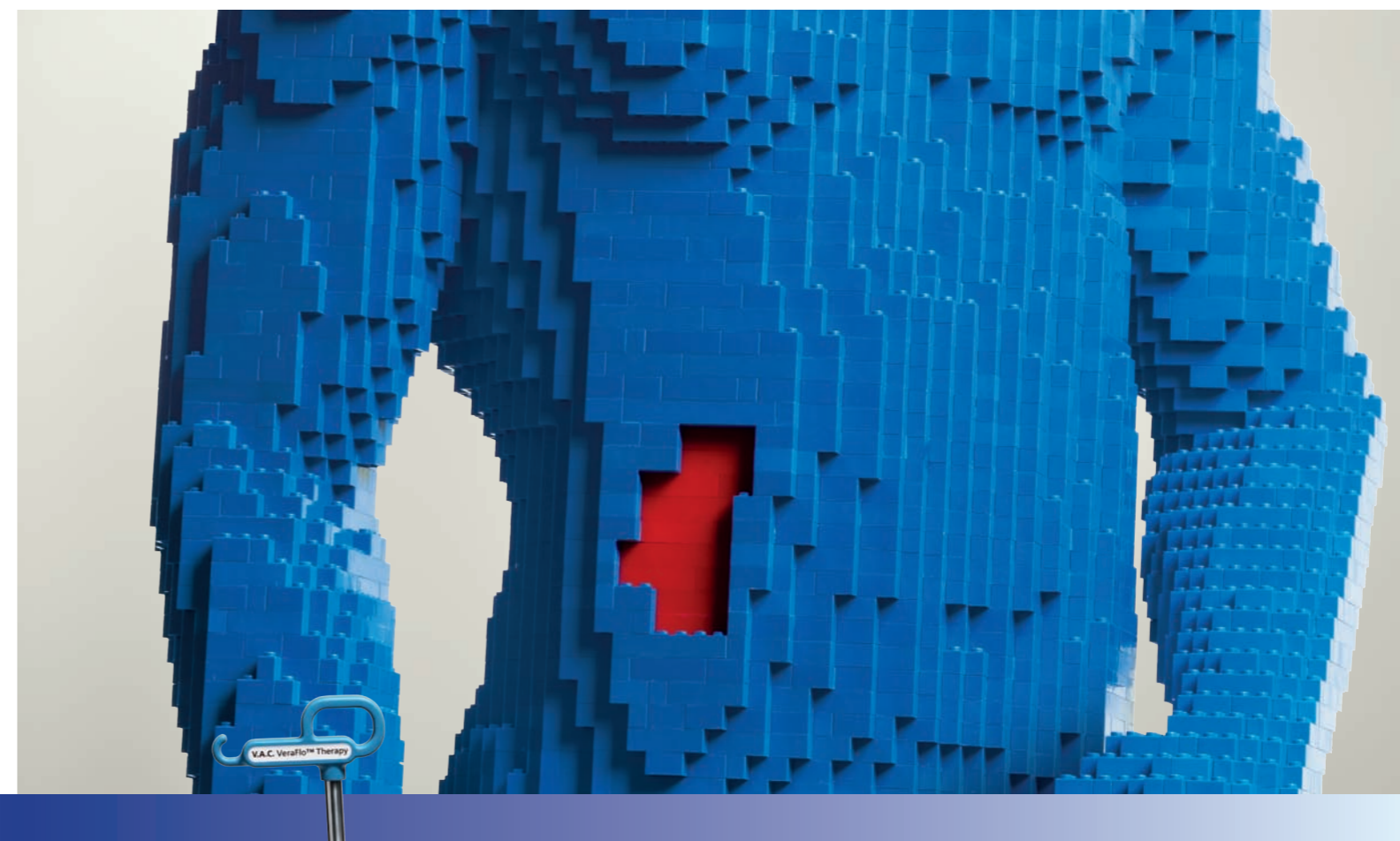

Tutti gli elementi di cui hai bisogno per un wound healing personalizzato.

Sistema terapeutico V.A.C.Ulta™

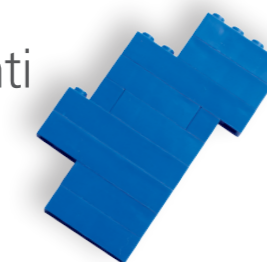

## V.A.C.® Therapy

V.A.C.® THERAPY GARANTISCE VANTAGGI COMPROVATI.

### Completa guarigione

I meccanismi di azione promuovono la formazione di tessuto di granulazione mantenendo un ambiente di guarigione della ferita chiuso e umido.

### Sperimentazione clinica

V.A.C.® Therapy è l'unica tecnologia a pressione negativa per le ferite convalidata da oltre 20 studi clinici randomizzati e controllati e da più di 600 articoli peer-reviewed.

### Convenienza

Gli studi pubblicati dimostrano chiaramente che l'uso di V.A.C.® Therapy riduce:

- Tempo di guarigione della ferita<sup>1-3</sup>
- Periodo di degenza ospedaliera<sup>1-3</sup>
- Nuovi ricoveri<sup>1-3</sup>
- Necessità di nuovi interventi<sup>1-3</sup>





## V.A.C.® Therapy

### SISTEMA V.A.C.® THERAPY INTEGRATO

Le unità terapeutiche V.A.C.ULTA™ garantiscono una pressione negativa controllata e un monitoraggio accurato della somministrazione della terapia per una guarigione delle ferite rapida ed efficace.

La tecnologia SensaT.R.A.C.™ controlla la pressione negativa sul sito della ferita regolandola di conseguenza.

Le medicazioni V.A.C.® includono una gamma completa di prodotti per le diverse esigenze di trattamento delle ferite.

Il rilevatore Seal Check™ fornisce un feedback immediato per l'individuazione di eventuali perdite.

### ALGORITMI DI PRESSIONE PERSONALIZZATI

Pressione negativa continua (da -25 a -200 mmHg).

Il controllo dinamico della pressione rappresenta l'evoluzione della terapia intermittente che mantiene costantemente un livello di pressione negativa minimo (-25 mmHg) nel letto della ferita.

### INTERFACCIA UTENTE GRAFICA OTTIMIZZATA

Intuitivo menu touch screen.  
Semplice programmazione terapeutica.


V.A.C.® Therapy promuove la guarigione delle ferite grazie a meccanismi di azione sperimentati clinicamente.

#### ↑ Macrodeformazioni:

- Riduce i margini della ferita
- Rimuove l'essudato
- Riduce l'edema
- Rimuove il materiale infetto

#### ↑ Microdeformazioni:

- Promuove la formazione di tessuto di granulazione
- Proliferazione cellulare
- Migrazione dei fibroblasti

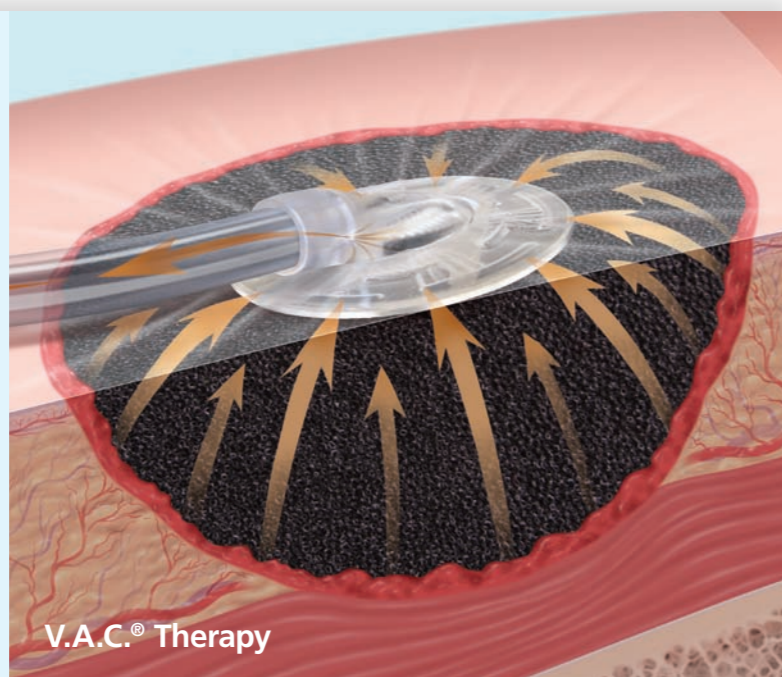

V.A.C.® Therapy

## Il sistema terapeutico V.A.C. Ultra™ è personalizzabile e garantisce una maggiore adattabilità alle ferite.

### V.A.C.® Therapy


Sperimentata clinicamente per il trattamento delle ferite con pressione negativa

### V.A.C. VeraFlo™ Therapy

Distribuzione e rimozione automatica dei fluidi

### Specificità terapeutica

Medicazioni e accessori per un'assistenza personalizzata

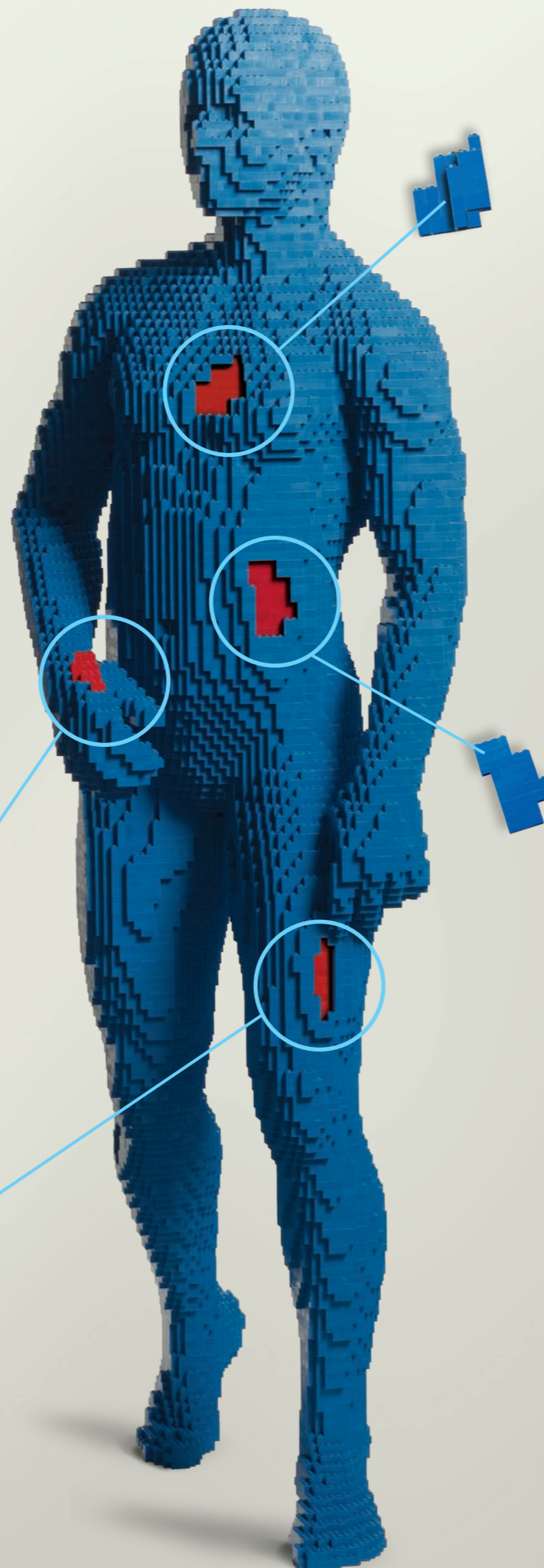

V.A.C. VeraFlo™ Therapy unisce l'instillazione controllata di soluzioni per il trattamento topico delle ferite alla terapia a pressione negativa.

### CARATTERISTICHE DI V.A.C. VERAFLU™ THERAPY:

#### Somministrazione volumetrica

Una pompa controllata consente una somministrazione sicura e precisa delle soluzioni per il trattamento delle ferite.

#### Regolazione instillazione


Consente di determinare il volume di instillazione corretto.

#### Infiltrazione medicazione

Consente di instillare le soluzioni nella ferita semplificando la rimozione della medicazione e migliorando il comfort del paziente.

#### Cassetta V.A.C. VeraLink™

Contiene ed eroga le soluzioni per il trattamento delle ferite fornite dall'utente.

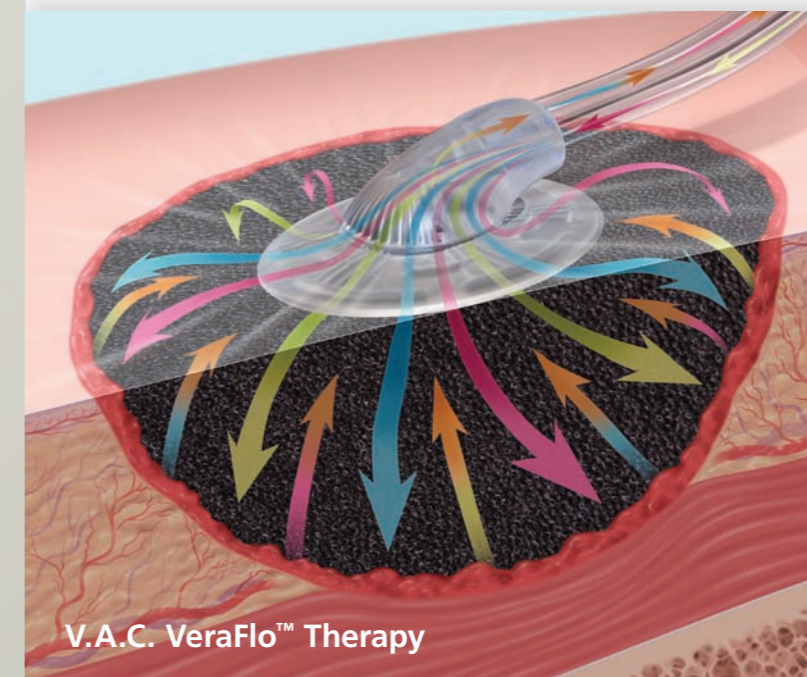

V.A.C. VeraFlo™ Therapy

### MEDICAZIONI V.A.C. VERAFLU™

Specifiche per V.A.C. VeraFlo™ Therapy, consentono una distribuzione e una rimozione uniforme delle soluzioni topiche sul letto delle ferite. La maggiore forza tensile rispetto a V.A.C.® GranuFoam™ garantisce la completa rimozione della schiuma.



#### Medicazione V.A.C. VeraFlo™

L'obiettivo principale è la granulazione, insieme a idratazione, lavaggio e flussaggio efficaci della ferita.



#### Medicazione V.A.C. VeraFlo Cleanse™

La scelta giusta per il trattamento delle infezioni nelle ferite che necessitano di una minore formazione di tessuto di granulazione.

### TECNOLOGIA V.A.C. VERAT.R.A.C.™

Evoluzione della tecnologia SensaT.R.A.C.™ per l'erogazione e la rimozione delle soluzioni mediante un pad singolo o doppio.

V.A.C. VeraFlo™ Therapy unisce i vantaggi di V.A.C.® Therapy alla distribuzione e rimozione automatica della soluzione.

#### ↑ Pulizia

grazie all'instillazione regolare e controllata di disinfettanti per il trattamento topico delle ferite

#### ↑ Trattamento

dei materiali infetti con l'instillazione di soluzioni topiche antimicrobiche e antisettiche appropriate.

#### ↑ Guarigione

della ferita e predisposizione alla chiusura per prima o seconda intenzione.